




ECG MARKER

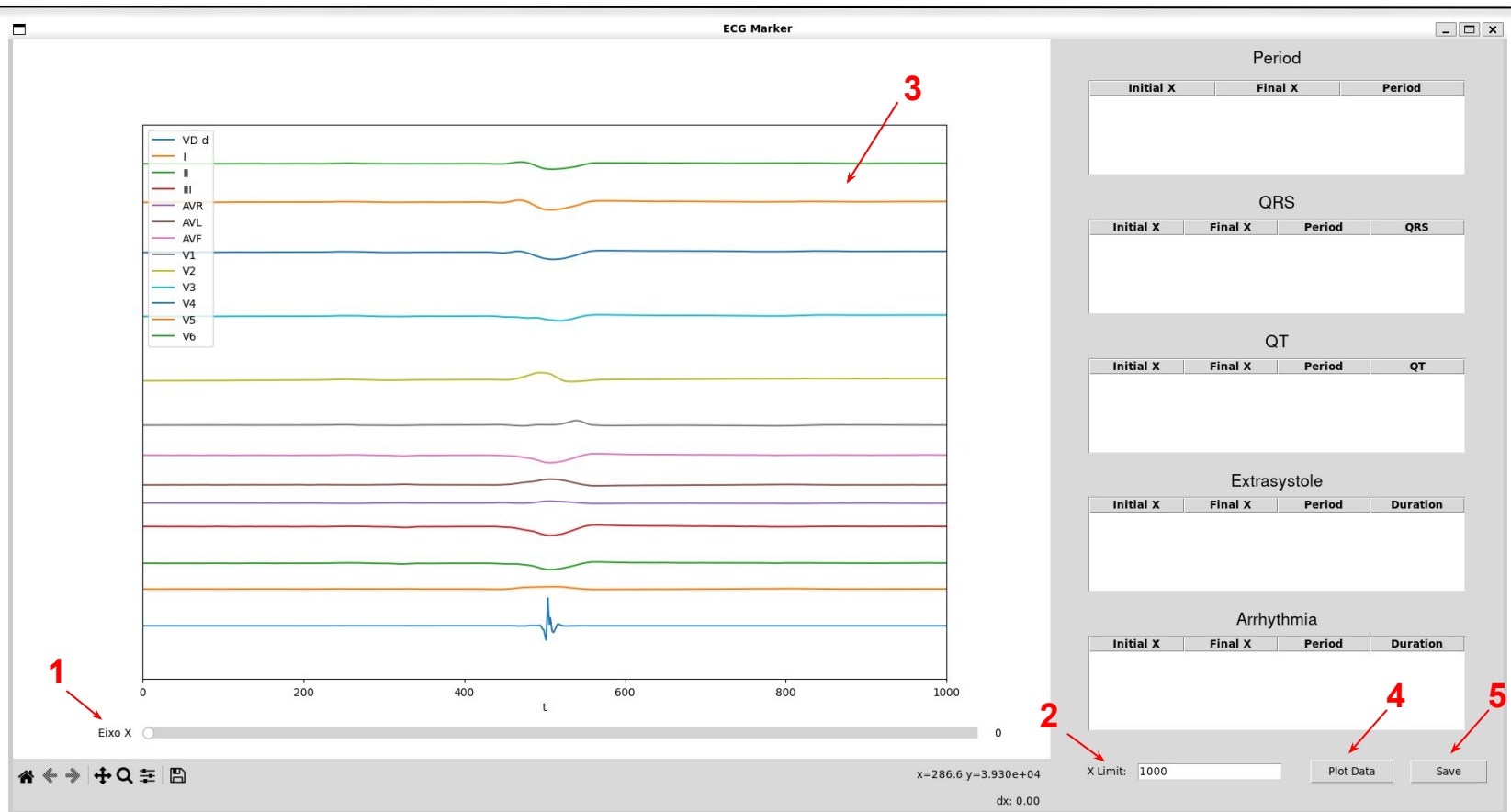

ECG MARKER

- Marcação dos dados de ECG:
 - 1. Barra de rolagem.
 - 2. Ferramenta para alterar o intervalo de tempo em exibição na janela.
 - 3. Janela de exibição, empregada para marcar os dados de interesse:
 - 1 clique para marcar início do intervalo de interesse e outro para marcar fim do intervalo de interesse.
 - Opções de Marcação:
 - Tecla F para adicionar período.
 - Tecla R para adicionar QRS.
 - Tecla T para adicionar QT.
 - Tecla E para adicionar extra sístole.
 - Tecla A para adicionar arritmia.
 - Tecla C para cancelar marcação.
 - Para marcar QRS, QT, arritmia e extra sístole é necessário informar o período a que a marcação está associada.
 - Para cálculo correto da velocidade, sempre que o QRS for marcado, é necessário marcar também o QT e vice versa.
 - 4. Ferramenta para plotar curva estimada do APD e da velocidade do paciente.
 - 5. Ferramenta para salvar os dados marcados.

Estudo Eletrofisiológico

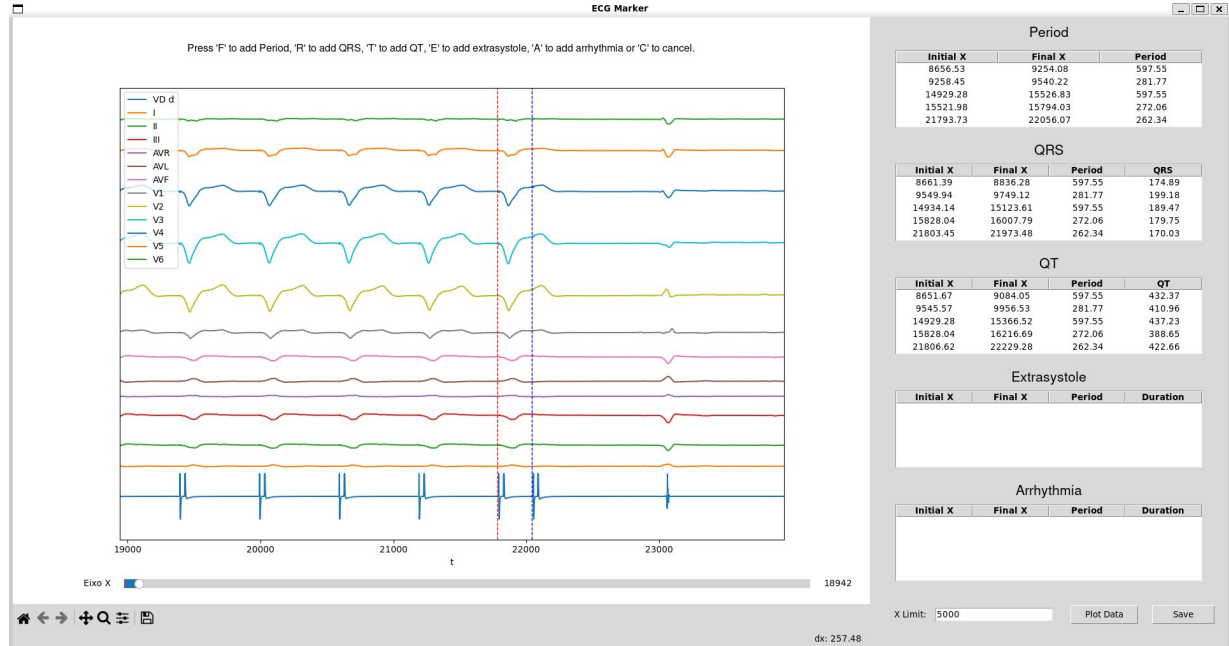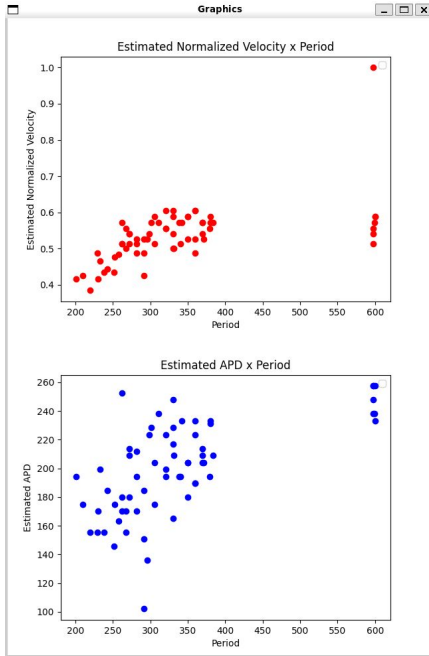

ECG MARKER

- Marcação dos dados de ECG:
 - Ferramentas extras:
 - Ao selecionar uma linha das tabelas é possível visualizar a marcação feita na janela de exibição.
 - Ao clicar em ESQ todas as linhas em exibição na janela são removidas.
 - Ao selecionar uma linha das tabelas e clicar em DELETE a marcação feita é apagada.