


# ECG MARKER


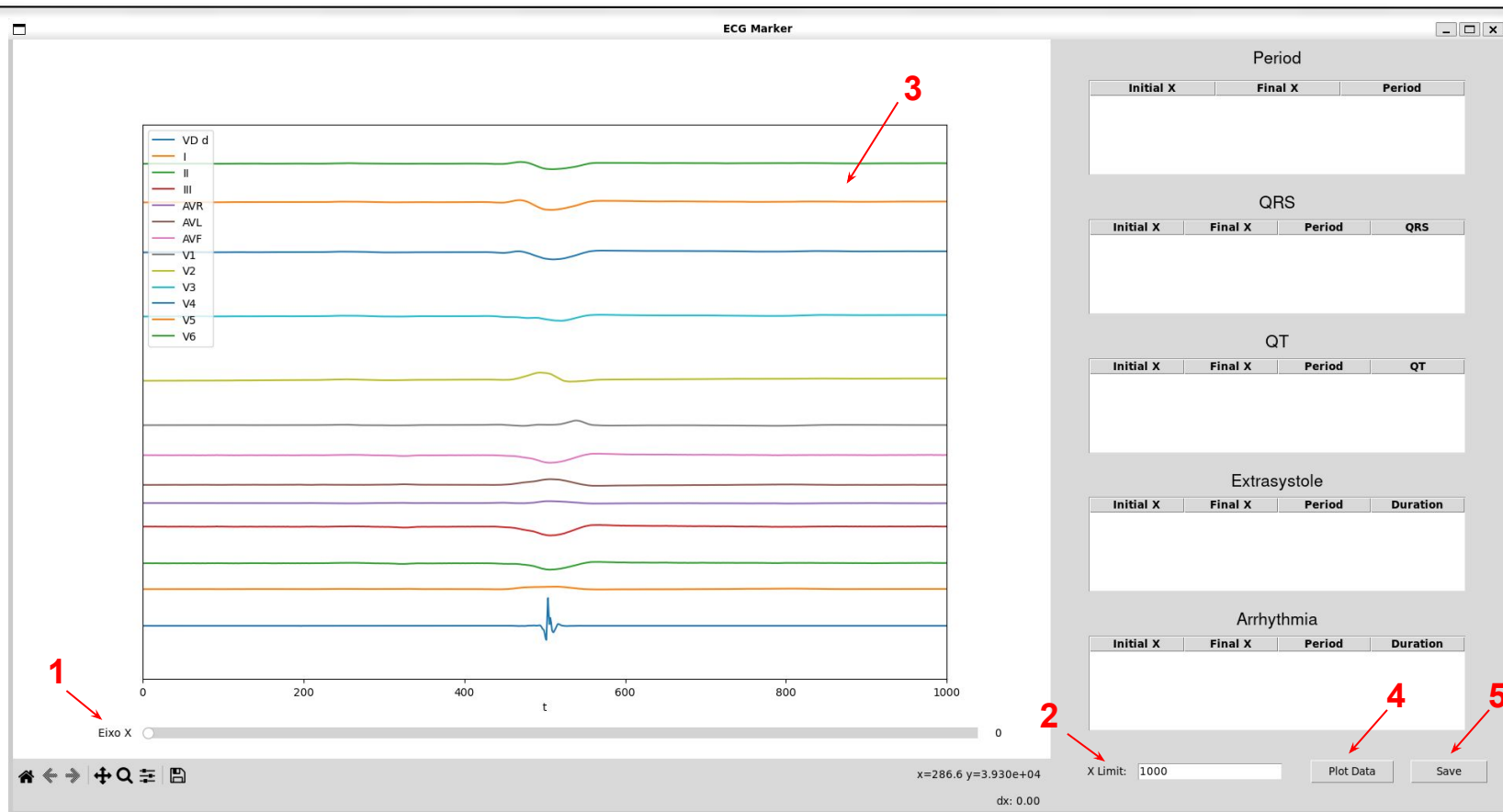


# ECG MARKER

---

- Marcação dos dados de ECG:
  - 1. Barra de rolagem.
  - 2. Ferramenta para alterar o intervalo de tempo em exibição na janela.
  - 3. Janela de exibição, empregada para marcar os dados de interesse:
    - 1 clique para marcar início do intervalo de interesse e outro para marcar fim do intervalo de interesse.
    - Opções de Marcação:
      - Tecla F para adicionar período.
      - Tecla R para adicionar QRS.
      - Tecla T para adicionar QT.
      - Tecla E para adicionar extra sístole.
      - Tecla A para adicionar arritmia.
      - Tecla C para cancelar marcação.
    - Para marcar QRS, QT, arritmia e extra sístole é necessário informar o período a que a marcação está associada.
    - Para cálculo correto da velocidade, sempre que o QRS for marcado, é necessário marcar também o QT e vice versa.
  - 4. Ferramenta para plotar curva estimada do APD e da velocidade do paciente.
  - 5. Ferramenta para salvar os dados marcados.

# ECG MARKER

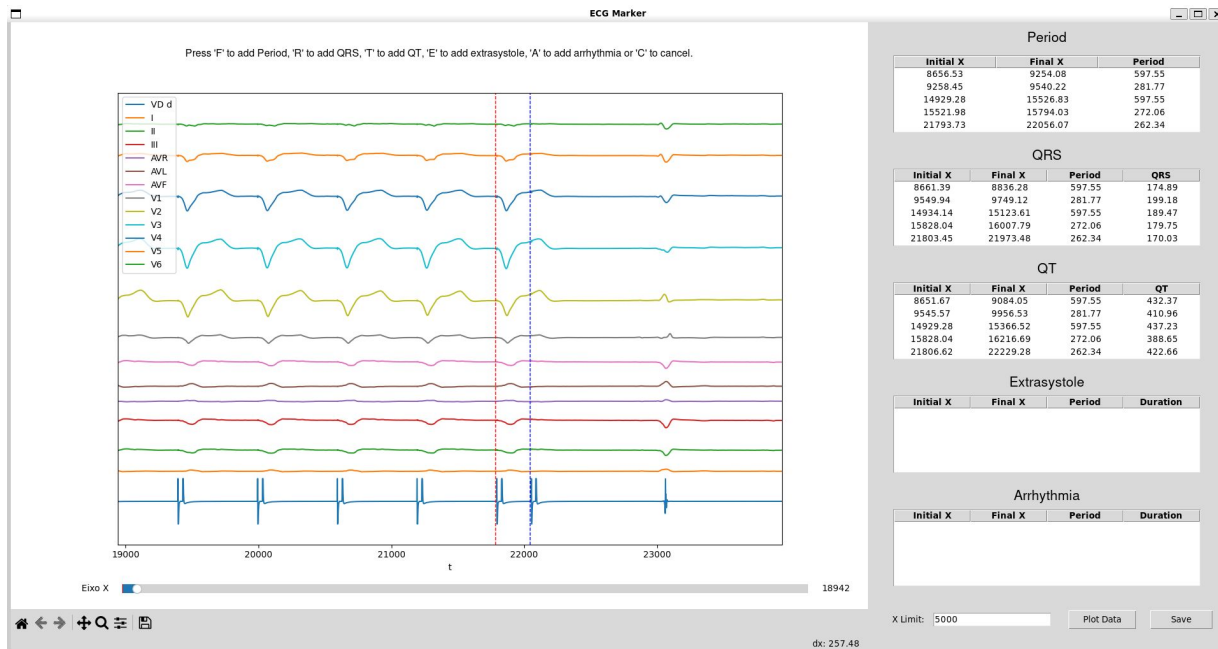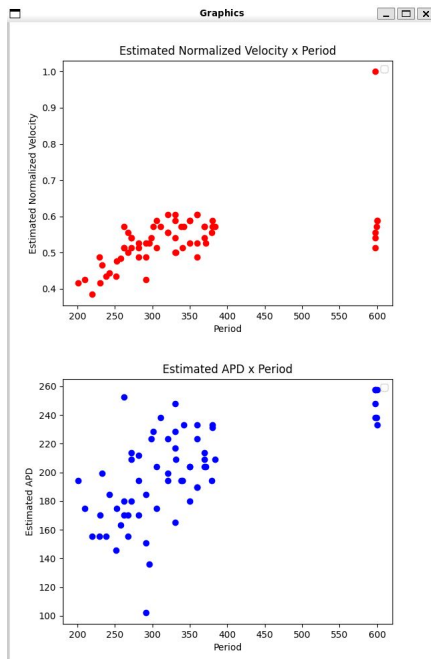

# ECG MARKER

---

- Marcação dos dados de ECG:
  - Ferramentas extras:
    - Ao selecionar uma linha das tabelas é possível visualizar a marcação feita na janela de exibição.
    - Ao clicar em ESQ todas as linhas em exibição na janela são removidas.
    - Ao selecionar uma linha das tabelas e clicar em DELETE a marcação feita é apagada.